

Pilot plant reactors 5–15 l

Büchi miniPilot 5, 10 and 15

Reaktoren für Pilotanlagen 5–15 l

Büchi miniPilot 5, 10 und 15



Features

Eigenschaften

- Swiss Quality
Schweizer Qualität
- Safe and reliable
Sicher und zuverlässig
- Modular and compact
Modular und kompakt
- ATEX / CE
ATEX / CE
- Easy handling
Einfache Bedienung
- Fits in walk-in fume hood
Passt in begehbaren Laborabzug
- Turnkey solution
Schlüsselfertige Lösung
- Available with nutsche filters, scrubber etc.
Erhältlich mit Filternutschen, Gaswäscher etc.

Applications

Anwendungen

- Chemical syntheses
Chemische Synthesen
- Extraction / evaporation
Extraktion / Verdampfung
- Purification / crystallization
Aufreinigung / Kristallisation
- Separation
Trennung
- cGMP API production
cGMP Wirkstoff-Herstellung
- Scale-up
Scale-up

Customized solutions for your specific process requirements

Buchi miniPilot 5, miniPilot 10 and miniPilot 15

Büchi miniPilot 5, miniPilot 10 und miniPilot 15

Features

- -1.0 to +1.0 bar in vessel (without glass upper section)
- -60°C (optional -90°C) to +200°C
- 0 – 600 rpm
- ATEX Classification: 2G IIB, other classification on demand
- CE / cGMP / TA-Luft
- Highly corrosion resistant materials: Glass / PTFE/ PFA / PEEK
- Compact design
- CIP capable
- Delivery fully assembled

System Setup

- Interchangeable 5,10 and 15 liter glass reactor
- Solid stainless steel cover plate with PFA coating, 7 openings for solid feed, liquid dosing, inertisation, etc.
- Dry-running mechanical seal with ATEX stirrer drive
- Easy interchangeable stirrers: anchor, impeller, pitched blades, PFA coated or glass lined steel
- Baffle with Pt100
- Dead volume-free bottom valve
- Hose connections (solid and safe) for TCU, optimal temperature control
- Mobile stainless frame on wheels or on feet, fits in standard fume hood

Options

- Multipurpose glass overhead for vacuum distillation, reflux including feeder, receiver, phase separator, manometer, etc.
- Customized glass overhead
- Reactor lift for easy vessel cleaning and stirrer exchange
- Triple wall vessel (for cryogenic application)
- Measure / control of temp., pressure / vacuum, stirrer speed, pH
- Sampling device
- Clean room design
- Glass coating Glassprotect-P, antistatic, shatter protection

Applications

- Various syntheses
- Distillation
- Phase separation (in glass overhead)
- Evaporation
- Multi-component reactions
- Gas dispersion into liquid
- Extraction of multi phase mixtures
- Crystallization
- Refluxing

Merkmale

- -1.0 bis +1.0 bar im Gefäß (ohne Glasaufbau)
- -60°C (optional -90°C) bis +200°C
- 0 – 600 rpm
- ATEX Klassifizierung: 2G IIB, andere Klassifizierung auf Anfrage
- CE / cGMP / TA-Luft
- Hoch korrosionsbeständige Werkstoffe: Glas / PTFE/ PFA / PEEK
- Kompakte Bauweise
- CIP fähig
- Lieferung komplett zusammengebaut

System-Aufbau

- Austauschbarer 5,10 oder 15 Liter Glasreaktor
- Robuste Stahldeckelplatte mit PFA Beschichtung, 7 Öffnungen für Feststoffzugabe, Flüssigkeitsdosierung, Inertisierung, und mehr
- Trockenlaufende Rührwellendichtung
- Einfach austauschbare Rührer: Anker, Impeller, Schrägblatt, PFA beschichtet oder emailliert
- Stromstörer mit Pt100
- Totvolumenfreies Bodenauslaufventil
- Schlauchanschluss (robust und sicher) für Thermostaten, optimale Temperaturregelung
- Mobiles rostfreies Gestell auf Rädern oder fix auf Füßen, passend in jeden Standard-Laborabzug (Kapelle)

Optionen

- Mehrzweck-Glasaufbau für Vakuum (Rückfluss-) Destillation inklusive Vorlage, Zulaufgefäß, Phasenabscheider, Manometer, etc.
- Sonderausführung Glasaufbau
- Reaktorlift für einfache Reinigung des Gefäßes und Rührer-Austausch
- 3-Wand Gefäß (Tieftemperatur Anwendung)
- Messen / Regeln von Temp., Druck / Vakuum, Rührer Drehzahl, pH
- Probenahmesystem
- Reinraumausführung
- Glasbeschichtung Glassprotect-P, antistatisch, Splitterschutz

Anwendungen

- Verschiedenste Synthesen
- Destillation
- Phasenabschneidung (im Glasaufbau)
- Eindampfen
- Multi-Komponenten-Reaktionen
- Gaseinleitung in die Flüssigkeit
- Extraktion von Mehrphasengemischen
- Kristallisation
- Refluxieren



Solid steel cover plate, PFA coated, 7 ports
Dry-running mechanical seal, powerful stirrer drive
Solide Stahl-Deckelplatte, PFA-beschichtet, 7 Anschlüsse
Trockenlaufende Rührwellendichtung, leistungsstarkes Rührwerk




Interchangeable stirrers
auswechselbare Rührer



PFA-coated stirrer, one-piece
PFA-beschichteter Rührer, einteilig

Optional tripple wall vessel
Optionales 3-Wand Gefäß

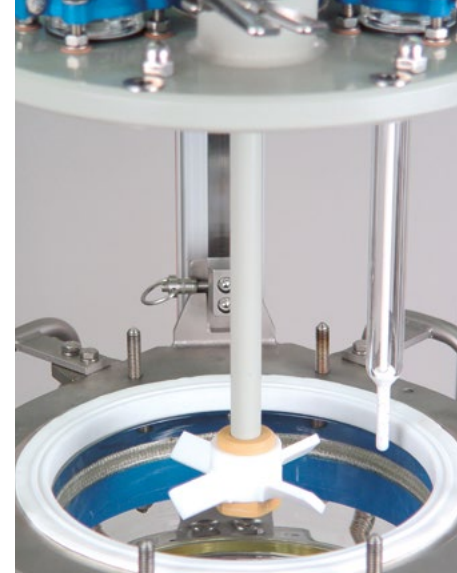

PFA coated stirrer shaft
PFA-beschichtete Rührwelle



Lowering device with tensile load protection
Absenkvorrichtung mit Zuglastsicherung



Glass overhead with spiral condenser, reflux divider, phase separator and distillate receiver
Glasaufbau mit Spiralkühler, Rücklaufteiler, Phasentrenner und Destillatgefäß



Vessel lowering device
Gefäß-Absenkvorrichtung



Flush-mount drain valve
Totvolumenfreies Bodenventil

The Büchi miniPilot family

Die Büchi miniPilot Familie



Gas scrubber, miniPilot reactor, nutsche filter (stirred)
Gaswäscher, miniPilot Reaktor, Filternutsche (gerührt)

Nutsche filter


Nutschenfilter



Nutsche filter with hand stirrer
Filternutsche mit Handrührer



Manual lift for easy opening/closing
Absenkvorrichtung für einfaches Öffnen / Schliessen

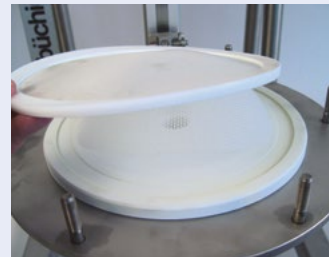

Quick filter change
Schneller Filterwechsel

Options

Optionen




efficient cleaning with CIP spray nozzle
effiziente Reinigung mit CIP Sprühkopf




Sampling system
Probenahmesystem



Clean room design
Reinraumausführung

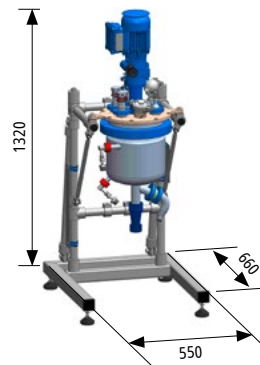

miniPilot 5
 without glass overhead
 Table top model
 Dimension (WxDxH):
 550 x 660 x 1320 mm
*miniPilot 5
 ohne Glasaufbau
 Tischmodell
 Abmessung (BxTxH):
 550 x 660 x 1320 mm*

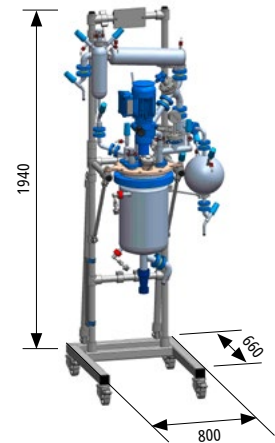

miniPilot 10
 with glass overhead
 Floor model
 Dimension (WxDxH):
 800 x 660 x 1940 mm
*miniPilot 10
 mit Glasaufbau
 Bodenmodell
 Abmessungen (BxTxH):
 800 x 660 x 1940 mm*